


SAUER Bendi Bag

... urinuppsamlingspåse för rullstolsburna

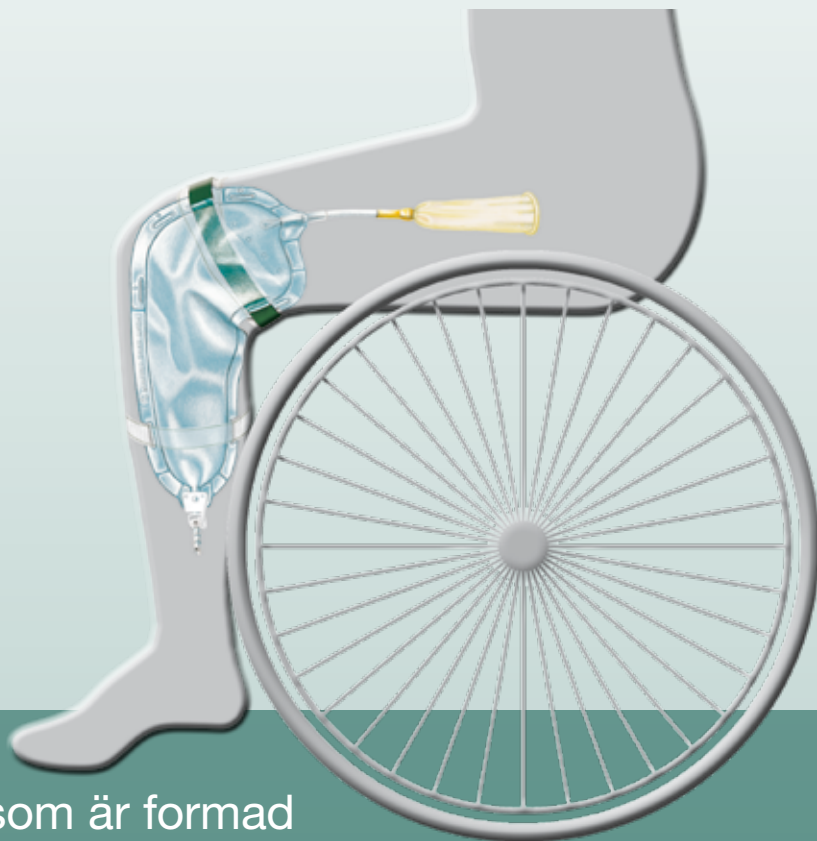


Urinuppsamlingspåse, som är formad efter benet för att garantera en bekväm känsla

Kvalitet och bekvämlighet


Benpåsarnas form är utformad speciellt för rullstolsburna människor. Den sittande ställningen har tagits i beaktande. Bekvämlighet, flexibilitet och trygghet

är benpåsens självklara egenskaper. Från det breda urvalet är det möjligt att hitta en påse, som passar var och ens individuella behov.

Olika modeller
finns tillgängliga

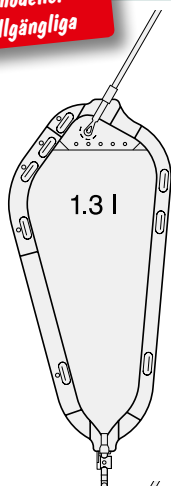

1.3 l

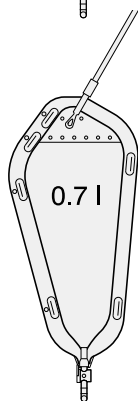

0.7 l

SAUER Bendi Bag

Stor volym

Den 1,3 liters urinuppsamlingspåsen erbjuder möjlighet till längre resor och arbeten, utan tillgång till lämpliga toaletter. Den mindre, 0,7 liters påsen, lämpar sig bättre för barn och ungdomar.

Formad efter benet

Den böjda slangen och påsens speciella form är garanterat pålitlig i sittande ställning. Benpåsarna är sköna, omärkbara och pålitliga. Påsen är enkel att tömma.

100 % testad

För garanterad täthet och funktionsduglighet har varje påse testats *enskilt*.

Den mönstrade

ytan är mycket hållbar och en aning sträv för att inte fastna i svettig hud.



Mer information om vårt breda sortiment får du genom att kontakta **Dolema AB**, tel. 08-446 15 06 eller info@dolema.com

Egenskaper

1 Kopplingen

Lätt och säker att använda med alla katetrar och urindroppssamlare:

- räfflad konnektor

2 Slang

Mjuk, i olika längder.

3 Svetsat slangfäste

möjliggör att urinet flyter problemfritt oavsett påsens ställning.

4 Backventil

hindrar urinet att rinna tillbaka t.ex. vid sjukgymnastik.

5 Knapphål

gör det möjligt att justera fixeringsbanden till lämplig längd enligt individuella behov.

6 Tömningsventil

gör det möjligt att tömma påsen enkelt och snyggt:

- Tappventil: lätt att hantera även med bristfällig fingerkapacitet. Ett extra gummiband kan användas för att hindra tömningensventilen att öppnas av misstag.


7 Svetsade sömmar

Slangfästet, backventilen och uttömningsventilen är svetsade. Tack vare den dubbla sömmen är påsen mycket hållbar.



Produktsortimentet

Urinuppsamlingspåse tillgängliga i förpackningar om 30 st.

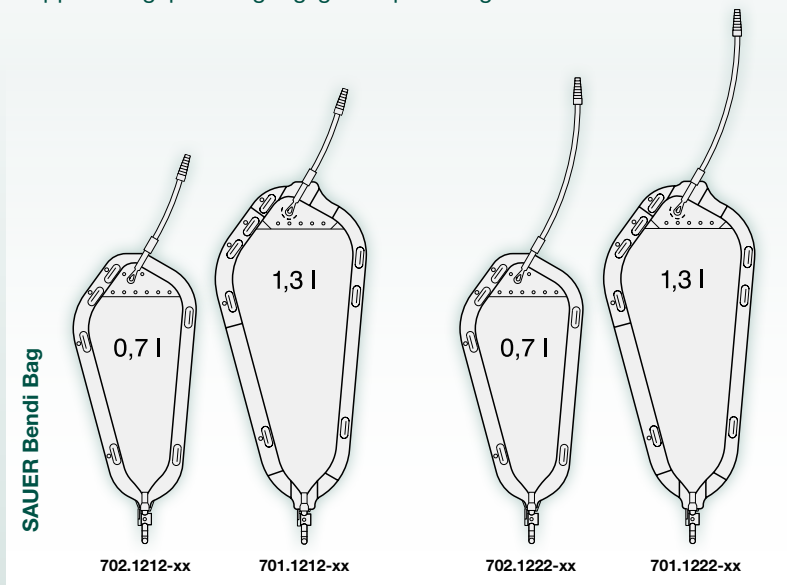


SAUER Bendi Bag

- 700 ml, tappventil, slang: mjuk, 12 cm lång, med räfflad konnektor, backventil
- 700 ml, tappventil, slang: mjuk, 22 cm lång, med räfflad konnektor, backventil
- 1300 ml, tappventil, slang: mjuk, 12 cm lång, med räfflad konnektor, backventil
- 1300 ml, tappventil, slang: mjuk, 22 cm lång, med räfflad konnektor, backventil

SAUER Functional urinuppsamlingspåse

- 2000 ml, tappventil, 90 cm lång, med räfflad konnektor, backventil
- 2000 ml, tappventil, 120 cm lång, med räfflad konnektor, backventil

SAUER Functional urinuppsamlingspåse

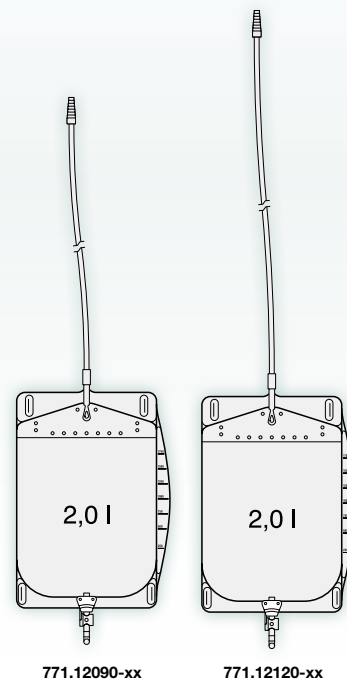

Beställnings nr.

- 702.1212-30
- 702.1222-30
- 701.1212-30
- 701.1222-30

- 771.12090-30
- 771.12120-30

Distributör:



Dolema AB • Bergkällavägen 27 B • 192 79 Sollentuna • Sverige
Tel. 08-446 15 06 • Fax 08-446 15 07
info@dolema.com • www.dolema.com



MANFRED SAUER GMBH
Hersteller von Medizinprodukten

Neurott 7 – 15 • 74931 Lobbach • Germany
Tel. +49 6226 960 104 • Fax +49 6226 960 011
export@manfred-sauer.de • www.manfred-sauer.com



SE 2018-02
REF 99.898

